



FICHA TÉCNICA

Categoría de producto: Aislante para modelos.

Nombre del producto: Aislante 3D.

Propósito de uso: Aislante separador de acrílicos sobre modelos impresos en resina 3D.

Embalaje: Consulte la etiqueta del producto.

Referencia: PE2364

Registro INVIMA:

PRECAUCIONES:

1. Precaución antes de usar.

- Compruebe que el producto no esté dañado o agrietado.
- No deje caer el producto al suelo ni aplique una fuerza excesiva, ya que esto puede dañarlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Guárdalo a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.

2. Almacenamiento y mantenimiento después de su uso.

- Almacene el producto a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.
- Empaque y almacene el producto adecuadamente para que no se dañe.
- No deje el producto destapado después de usar.
- Guárdelo a temperaturas que pueden oscilar entre 0 °C ~ 40 °C y una humedad relativa de 10% r.H]90%r.h, a presiones atmosféricas de 500 hPa ~ 1060 Hpa.

COMPOSICIÓN:

- Copolímeros.
- Cargas minerales.
- Agua desionizada.
- Aglutinante.

***Este es un producto de un solo uso.**

1. Características principales.


Formulado para la impermeabilización de modelos impresos con resina 3D. Su fórmula avanzada permite un perfecto aislado previo a la exposición de otras resinas como el acrílicos, composites y/o fibra de carbono.

- Soluble al agua.
- Aísla sin dejar residuos.
- No mancha.
- No permite daños superficiales al contacto con monómero.
- Buen tiempo de trabajo.

CUIDADO:

- El uso de este producto es exclusivo para profesionales especializados en la fabricación de prótesis dentales.
- Todas las instrucciones de uso deben seguirse correctamente; cualquier uso inadecuado, o distinto al indicado, es responsabilidad del profesional.
- Deberá respetarse la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- El producto debe almacenarse y manipularse lejos del calor excesivo y la exposición a la luz solar.
- Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
- Matener fuera del alcance de los niños.

SÍMBOLOS EN EL EMPAQUE:

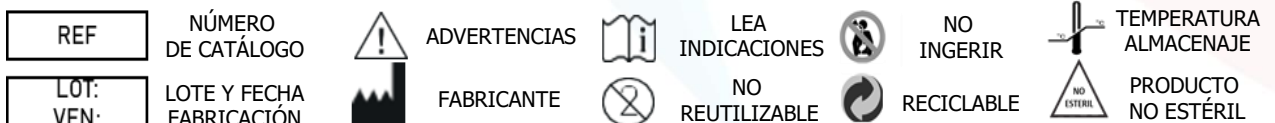



PREPARACIÓN PREVIA.

La aplicación debe estar previamente supervisada por un profesional especializado.

- Limpie la superficie antes de aplicar.
- Aplique una capa de aislante 3D bien extendida sobre el modelo.
- Deje actuar por 2 minutos aproximadamente.

Fecha de Creación: 2024-02-12

Origen: Medellín – Colombia

Coordinador Técnico.

Fecha de Actualización: Actual

Páginas: 3/3

Fabricación: Eresin Materiales y Equipos S.A.S

Rep. Legal: Fabio David Infante